

HYDRAFACIAL ANTI-AGING BOOST PLUS

M/HYDRAFACIAL REGEN GF BOOSTER



ReGen GFTM

Skin Perfecting Protein Solution with M-007TM Technology

Benefits

- Regenerative Peptides mimic growth factors to boost production of collagen and elastin.
- Breakthrough M-007TM delivery technology enhances treatments by allowing deeper, more effective absorption.

Ingredient Highlights

- Heptapeptide-32 maintains the appearance of healthy, youthful skin through collagen and elastin production.
- Copper peptide Cu-GHK regenerates healthy-looking skin by accelerating wound healing and skin repair.
- Palmitoyl tetrapeptide-7 treats inflammation while boosting the growth of collagen-producing tissues.
- Palmitoyl tripeptide-5 helps skin cells flush toxins while enhancing the appearance of firmness.
- Azelaoyl bis-dipeptide 10 addresses signs of aging by managing the formation of free radicals.



HYDRAFACIAL ANTI-AGING BOOST PLUS

M/HYDRAFACIAL REGEN GF BOOSTER



HUD-UTFORDRING – FINE LINJER, GUSTEN HUD, UJEVN HUDTEKSTUR OG LITEN GLØD

HYDRAFACIAL ANTI-AGING PLUS M/REGEN GF (GROWTH FACTOR) – REDUSERER TEGN PÅ ALDRING OG GJENNOPBYGGER HUDEN MED EN KOMBINASJON AV PEPTIDER + STARTSTEDET FOR REN, SUNN OG FRISK HUD MED NY GLØD!

HUDTYPE: ALLE

MÅLET MED HYDRAFACIAL ANTI-AGING PLUS M/REGEN GF (GROWTH FACTOR):

- ØKER DEN NATURLIGE KOLLAGEN OG ELASTIN PRODUKSJONEN OG ØKER SÅRHELING PROSESSEN
- REDUSERE FINE LINJER, FORBEDRE ELASTISITET, FORBEDRER HUDTEKSTUR
- EKSFOLIERING, DYPRENS, DETOX
- FJERNE, DØDE HUDCELLER – TREKKE UT HUDORMER
- TILFØRSEL AV FUKT OG ANTIOKSIDANTER
- SUNN OG FRISK HUD MED NY GLØD.



TRINN 1: EKSFOLIERING - VAKUUM 16-18


• Utføres 2 ganger på hvert område




Activ-4



Stor blå tip

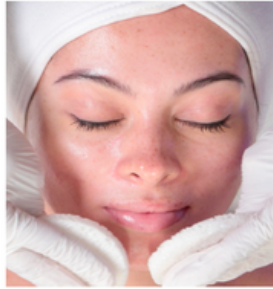

Rens

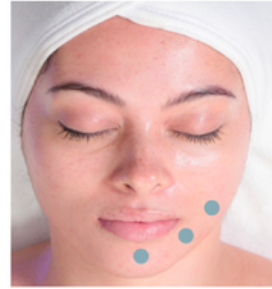

Tapping



Tapping



Tapping



Tapping



Tapping



Tapping



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Tapping/hold



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%

HYDRAFACIAL ANTI-AGING BOOST PLUS

M/HYDRAFACIAL REGEN GF BOOSTER

TRINN 2: PEEL - VAKUUM 14-16



GlySal Peel/PeelMD



Liten lysegrønn tip

- GlySal skal ligge på 2-3 min. før Trinn 3
- Skal nøytraliseres med vann - tapping med pads - ikke dra av



Tapping - fordel med hand



Tapping - fordel med hand



Tapping - fordel med hand



Tapping - fordel med hand

GLYSAL™

BENEFITS

- Combines the benefits of aggressive exfoliation and chemical peels into a one-step resurfacing procedure.
- The result combines accelerated peel benefits with visible skin rejuvenation and no irritation.

INGREDIENT HIGHLIGHTS

- Glycolic Acid – Exfoliator
- Salicylic Acid – Exfoliator

GLYSAL™ PREP

7.5% Glycolic Acid
2% Salicylic Acid Peel
pH Level 3.0–3.5



GLYSAL™ PEEL

15% Glycolic Acid
1.5% Salicylic Acid Peel
pH Level 3.0–3.3



GLYSAL™ PEEL MD

30% Glycolic Acid
1.5% Salicylic Acid Peel
pH Level 3.0–3.3
(Physicians Only)



HYDRAFACIAL ANTI-AGING BOOST PLUS

M/HYDRAFACIAL REGEN GF BOOSTER

TRINN 3: VAKUUM UTSUG - VAKUUM 20-30



Beta-HD Clear



Liten lysegrønn tip

- Utføres 2 ganger på hvert område



Sakte fjærlette strøk
overlapp 40-60%



Sakte fjærlette strøk
overlapp 40-60%



Tapping/hold



Sakte fjærlette strøk
overlapp 40-60%



Sakte fjærlette strøk
overlapp 40-60%



Sakte fjærlette strøk
overlapp 40-60%



Sakte fjærlette strøk
overlapp 40-60%



Sakte fjærlette strøk
overlapp 40-60%



Sakte fjærlette strøk
overlapp 40-60%



Sakte fjærlette strøk
overlapp 40-60%



HYDRAFACIAL ANTI-AGING BOOST PLUSS
M/HYDRAFACIAL REGEN GF BOOSTER

TRINN 4: REGEN GR (GROWTH FACTOR) - VAKUUM 16-18



ReGen GF (Growth Factor)

Stor klar tip



Tapping hold
2 sekunder



Tapping hold
2 sekunder



Tapping hold
2 sekunder


- Dette er en behandling for hele ansiktet.



Tapping hold
2 sekunder




Tapping hold
2 sekunder

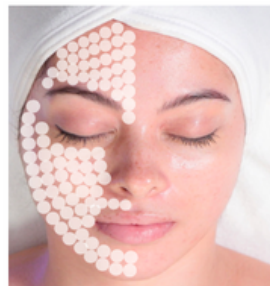

Tapping hold
2 sekunder



La Antiox+
absorberes i huden

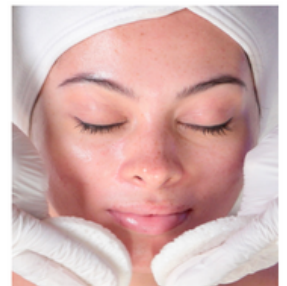

Avslutt med
ansiktsmassasje
med fuktighetskrem



HYDRAFACIAL ANTI-AGING BOOST PLUS

M/HYDRAFACIAL REGEN GF BOOSTER

TRINN 5: HELSE FOR HUDEN - VAKUUM 16-18



Antiox+



Stor klar tip



Tapping hold
2 sekunder



Tapping hold
2 sekunder



Tapping hold
2 sekunder



Tapping hold
2 sekunder




Tapping hold
2 sekunder



Tapping hold
2 sekunder



La Antiox+
absorberes i huden

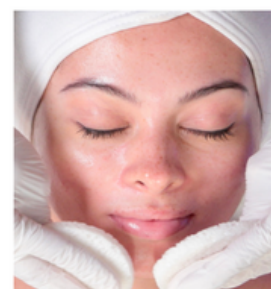

Avslutt med
ansiktsmassasje
med fuktighetskrem



HYDRAFACIAL ANTI-AGING BOOST PLUS
M/HYDRAFACIAL REGEN GF BOOSTER